

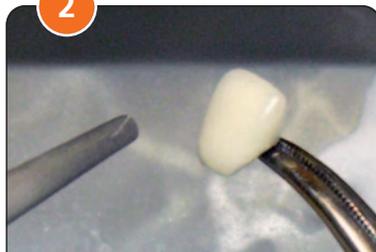
Denseo Fee bleach Gebrauchsanleitung

1


Die zu dunkle Krone

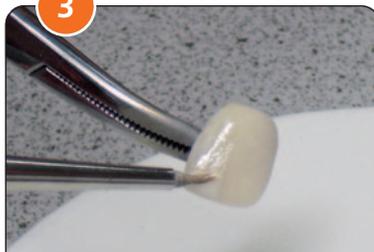
Denseo Fee bleach kann bei allen gängigen Verblendkeramiken auf Edel- oder Nichtedelmetallgerüsten, sowie auf Zirkongerüsten ab einer Brenntemperatur von 780° C eingesetzt werden.

Achtung:
anschließend nicht im Schwefelbad absäuern!

2


Anrauen der Krone

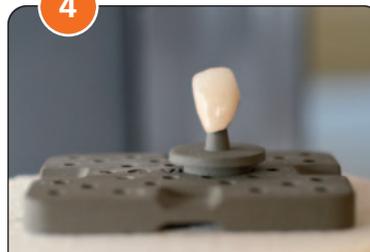
Damit die Denseo Fee bleach in die Keramik diffundieren kann, strahlen Sie die gesamte Oberfläche der aufzuhellenden Arbeit mit einem Abstrahlmittel an. Reinigen Sie die Oberfläche unter Wasserdampf.

3


Auftragen der Denseo Fee bleach

Trocknen Sie die Krone sorgfältig. Schütteln Sie den Stift und drehen Sie so lange am Endstück bis die Masse aus dem Applikator austritt.

Geben Sie das Bleachmaterial auf eine saubere Oberfläche (Anmischplatte). Tragen Sie dann mittels eines Pinsels die Masse sehr dünn und gleichmäßig auf die gesamte Arbeit auf.

4


Brennen der Krone

Brennen Sie die Krone analog nach den Angaben ihrer Verblendkeramik als Glanzbrand ab mindestens 780° C.

5


Das Ergebnis

Hier wurde eine Krone von A2 auf A1 aufgehellt.

Nach der Anwendung von Denseo Fee bleach ist kein zusätzlicher Glanzbrand erforderlich. Eventuelle weißliche Verfärbungen sind zu dick aufgetragenes Material und können ggf. durch gummiere und polieren entfernt werden.

Denseo Fee bleach Gebrauchsanleitung

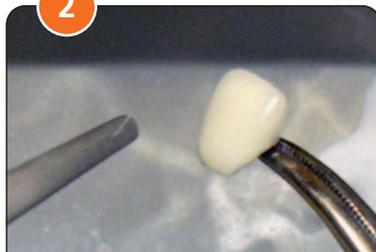
1


Die zu dunkle Krone

Denseo Fee bleach kann bei allen gängigen Verblendkeramiken auf Edel- oder Nichtedelmetallgerüsten, sowie auf Zirkongerüsten ab einer Brenntemperatur von 780° C eingesetzt werden.

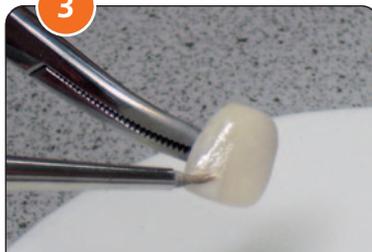
Achtung:

anschließend nicht im Schwefelbad absäuern!

2


Anrauen der Krone

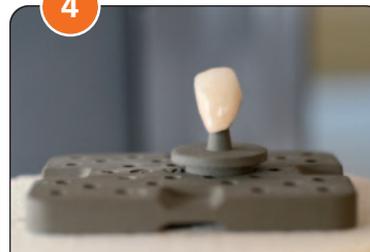
Damit die Denseo Fee bleach in die Keramik diffundieren kann, strahlen Sie die gesamte Oberfläche der aufzuhellenden Arbeit mit einem Abstrahlmittel an. Reinigen Sie die Oberfläche unter Wasserdampf.

3


Auftragen der Denseo Fee bleach

Trocknen Sie die Krone sorgfältig. Schütteln Sie den Stift und drehen Sie so lange am Endstück bis die Masse aus dem Applikator austritt.

Geben Sie das Bleachmaterial auf eine saubere Oberfläche (Anmischplatte). Tragen Sie dann mittels eines Pinsels die Masse sehr dünn und gleichmäßig auf die gesamte Arbeit auf.

4


Brennen der Krone

Brennen Sie die Krone analog nach den Angaben ihrer Verblendkeramik als Glanzbrand ab mindestens 780° C.

5


Das Ergebnis

Hier wurde eine Krone von A2 auf A1 aufgehellt.

Nach der Anwendung von Denseo Fee bleach ist kein zusätzlicher Glanzbrand erforderlich. Eventuelle weißliche Verfärbungen sind zu dick aufgetragenes Material und können ggf. durch gummiere und polieren entfernt werden.